
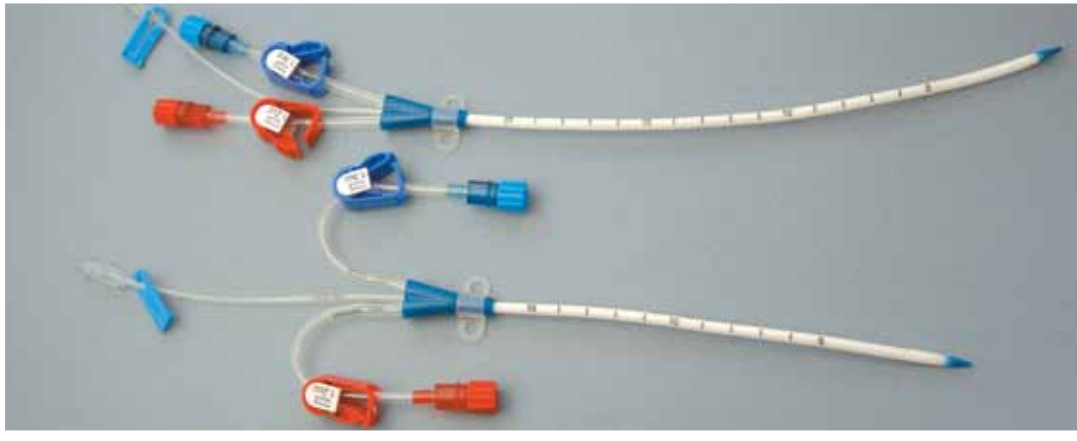


HEMODİYALİZ KATETER SETLERİ

HEMODİYALİZ UYGULAMALARINDA KALİTE

HEMODIALYSIS CATHETER SETS

QUALITY IN HEMODIALYSIS APPLICATIONS

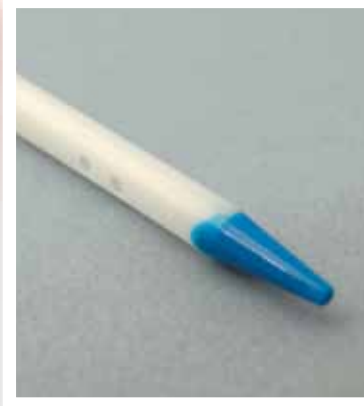

- Biouyumlu ve ısı duyarlı kateter malzemesi uygulama sonrası yumuşayarak hasta rahatlığı ve güvenlik sağlar.
- Yumuşak ve radiopak uç damar duvarına olabilecek hasar riskini ve duyarlılığı en aza indirir.
- İlk dolum hacmi bilgileri kateter bakımında kolaylık sağlar.
- 360°'lik venöz dönüş eksenli damar içinde türbülansı önler ve kan akımını artırır.
- 360°'lik arter eksenli damar tıkanmalarına ve arterial yetmezliğe engel olur.
- Güvenli Seldinger metodu ile yerleşime uygundur.
- Dönebilen tutturma kanatları güvenli sabitleme sağlar.
- Dayanıklı yüksek hafızalı uretan uzatma hatları sayısız klempelemelere uygundur.
- Birleşim noktasında yer alan çap ve uzunluk tanımları ürün özelliklerine kolay erişim sağlar.
- Gerilimi azaltan özel boyun kısmı giriş noktasında olabilecek kırıma ve kıvrılmaları önler.
- *Thermosensitive catheter material softens after insertion for increased patient safety.*
- *Soft, highly radiopaque tip reduces incidence of vessel damage and aids in confirming catheter tip replacement.*
- *Priming volume designation for ease of catheter maintenance.*
- *360° venous return ports decrease vessel turbulence while increasing blood flow.*
- *360° arterial ports help eliminate vessel occlusion and arterial insufficiency.*
- *Safe Seldinger Technique Insertion*
- *Rotatable suture wing provides secure anchoring.*
- *Durable high memory urethane extension lines will withstand repeated clamping.*
- *French size and length designations for ease of identification.*
- *Strain relief collar reduces kinking at the exit site.*

HEMODİYALİZ KATETER SETLERİ

HEMODIALYSIS CATHETER SETS



ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

ERİŞKİN HEMODİYALİZ KATETERLERİ / ADULT HEMODIALYSIS CATHETERS

Tanım / Description	Çap / Diameter	Kullanım Yeri / Application Site	Lümen Yapısı / Lumen Structure	Uzunluk / Length
İki lümenli / Double lumen	12/14 Fr	Subclavian-Femoral		15 cm 20 cm 24 cm
İki lümenli / Double lumen	12/14 Fr	Jugular		15 cm 20 cm 24 cm
İki lümenli kıvrık/ Double lumen bented	11.5 Fr	Jugular		15 cm 20 cm
Üç lümenli / Triple lumen	12 Fr	Subclavian-Femoral		15 cm 20 cm 24 cm
Üç lümenli / Triple lumen	12 Fr	Jugular		15 cm 20 cm 24 cm

ÇOCUK HEMODİYALİZ KATETERLERİ / PEDIATRIC HEMODIALYSIS CATHETERS

Tanım / Description	Çap / Diameter	Kullanım Yeri / Application Site	Lümen Yapısı / Lumen Structure	Uzunluk / Length
İki lümenli / Double lumen	9 Fr	Subclavian-Femoral		12 cm 15 cm

Set İçeriği / Set Content

Radiopak poliüretan kateter / uygun ebat ve uzunlukta damar genişletici / heparin lock / uygun ebat ve uzunlukta çift uçlu guidewire / uygun ebat ve uzunlukta seldinger iğne / 5 ml enjektör ve iğnesi / No: 11 bistüri

Radiopaque polyurethane catheter / appropriate size and length vessel dilator / heparin lock / appropriate size and length double ended guidewire / appropriate size and length seldinger needle / 5 ml syringe and needle / No:11 scalpel

Set içeriği isteğe göre düzenlenebilmektedir. / Set content can be designed according to customer needs.
Tekli kullanıma hazır paketlerde. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.

ÜRETİCİ / MANUFACTURER

AYRA MEDİKAL YATIRIMLAR LİMİTED ŞİRKETİ

Ankara Konya Devlet Karayolu Oğulbey Mahallesi
Serpemeler No: 336 Gölbaşı 06830 Ankara/Türkiye
Tel : +90 (312) 615 55 00
Fax : +90 (312) 615 53 00
E-mail : info@ayramed.com - bilgi@ayramed.com
Web : www.ayramed.com - www.sentia.com.tr



CE 1014

DIN EN ISO 9001 : 2008
DIN EN ISO 13485 : 2003

